



PROTEZE



Proteze donjih ekstremiteta


Proizvodimo proteze već više od 90 godina

Ortopedsko preduzeće Rudo AD više od 90 godina proizvodi proteze za donje ekstremitete. U kompletnoj ponudi ovih proteza odgovoreno je svim zahtevima pacijenata za pokretom posle hirurških amputacija. U skladu sa nivoom amputacije rade se odgovarajuće proteze. Proizvodni program sektora aplikacije obuhvata: Kanadske korpe, natkolene proteze, potkolene proteze, kao i proteze za sve amputacije na nivou stopala (Sajmova, Šopartova, Lisfrankova).

Mi protetišemo korisnike naših proteza

U skladu sa ovim u Rudo AD se aktivno radi na rehabilitaciji protetisanih pacijenata koje obuhvata adekvatnu obuku za korišćenje izrađenog pomagala.

Svojim višegodišnjim iskustvom i obrazovanjem tim protetičara i lekar ortoped, omogućavaju uspešnu rehabilitaciju i ponovnu aktivaciju ovih pacijenata.

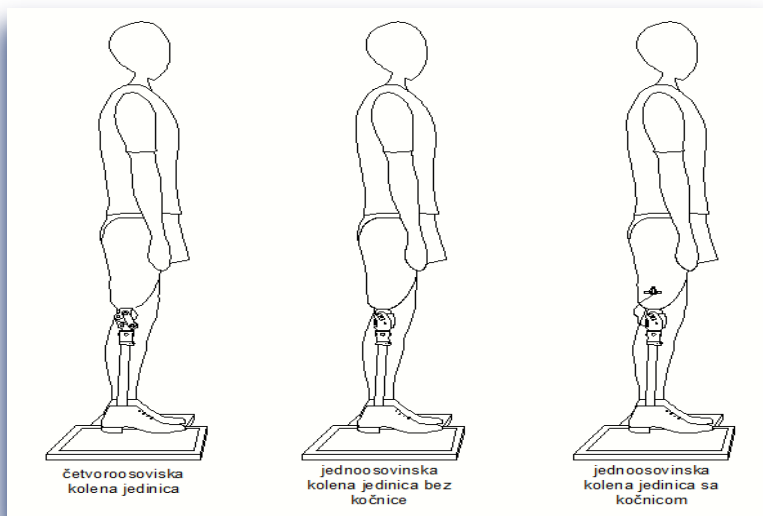


Jednoosovinsko koleno bez kočnice

Indikacije

Jednoosovinski koleno zglob izrađuje se od plemenitog čelika sa integrisanim pomeračem, namenjeno je isključivo protetskom zbrinjavanju donjih ekstremiteta.

Indikovano je kod amputacija natkolenice sa ograničenim stepenom pokretnosti.

Dozvoljeno za pacijente težine do 150 kg.

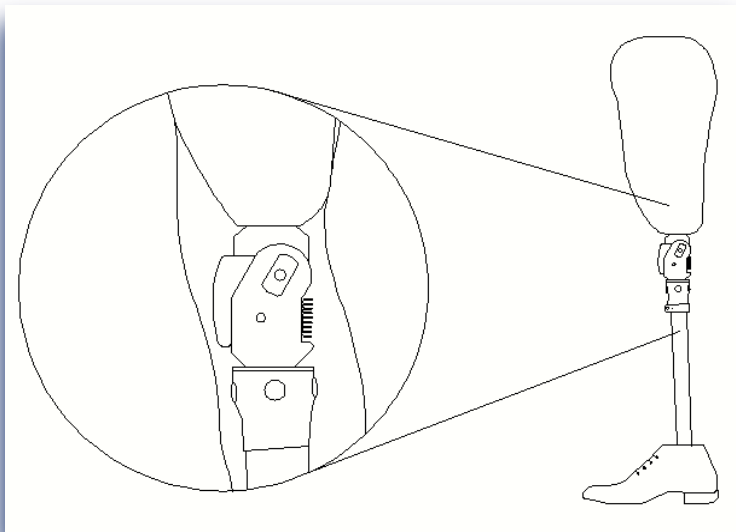

Jednoosovinsko koleno sa kočnicom


Indikacije

Jednoosovinsko koleno izrađeno od plemenitog čelika sa sigurnosnom kočnicom koristi se isključivo za protetsko zbrinjavanje donjih ekstremiteta.

Indikovano je kod amputacija sa zadržanim stepenom mobilnosti 1 (kretanje na unutrašnjem prostoru).

Dozvoljeno je za pacijente težine do 150 kg

Zbog niske visine zglob je pogodan za zbrinjavanje svih vrsta patraljaka osim kondilenskih. Bez promene celokupne dužine noge koleno zglob može se zameniti našim kolenom zglobom.

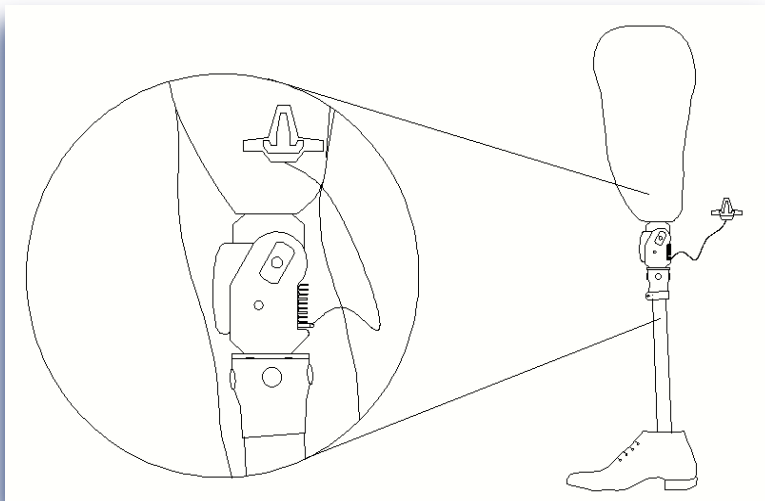


Četvoroosovinsko koleno

Indikacije

Četvoroosovinski zglob obezbeđuje rotaciono i translatorno kretanje zbog svog policentričnog pomeranja. Tokom fleksija centar rotacije menja svoj položaj, u zavisnosti od stepena fleksija. U vertikalnom položaju instantni centar rotacije nalazi se iznad zgloba i iza linije oslonca (težine), čime se obezbeđuje stabilnost kolena u potpuno ispravljenom položaju (videti sliku).


Dozvoljeno je za pacijente težine do 120 kg.

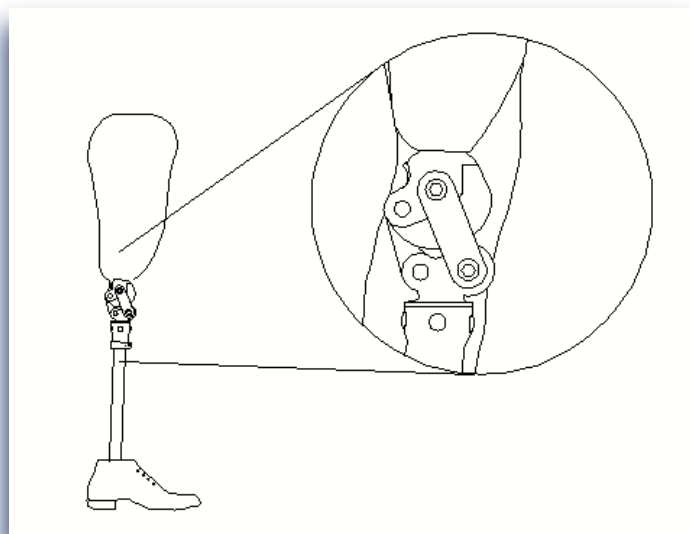


Skeletni potkoljeni set

Sastoji se iz četiri segmenta:

1. Spojnica ležista
2. Spojnica cevi
3. Cev sa spojnicom
4. Spojnica stopala

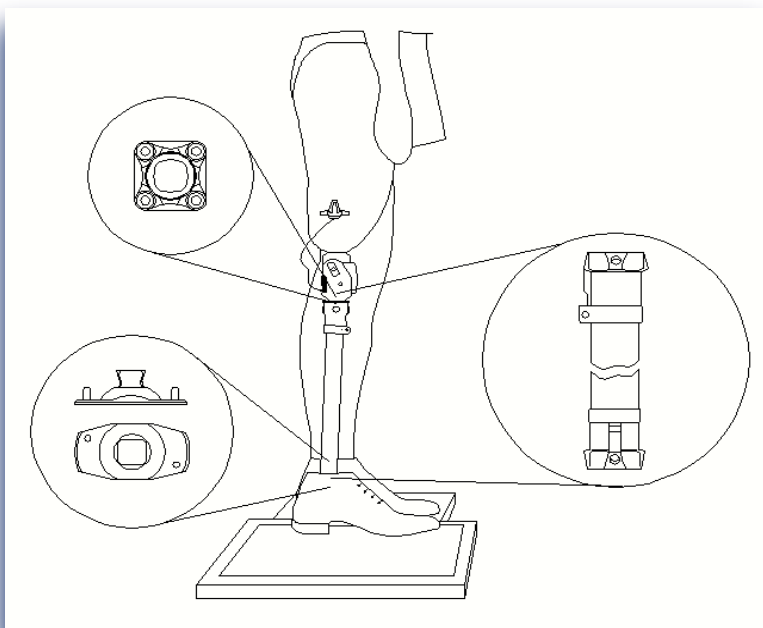

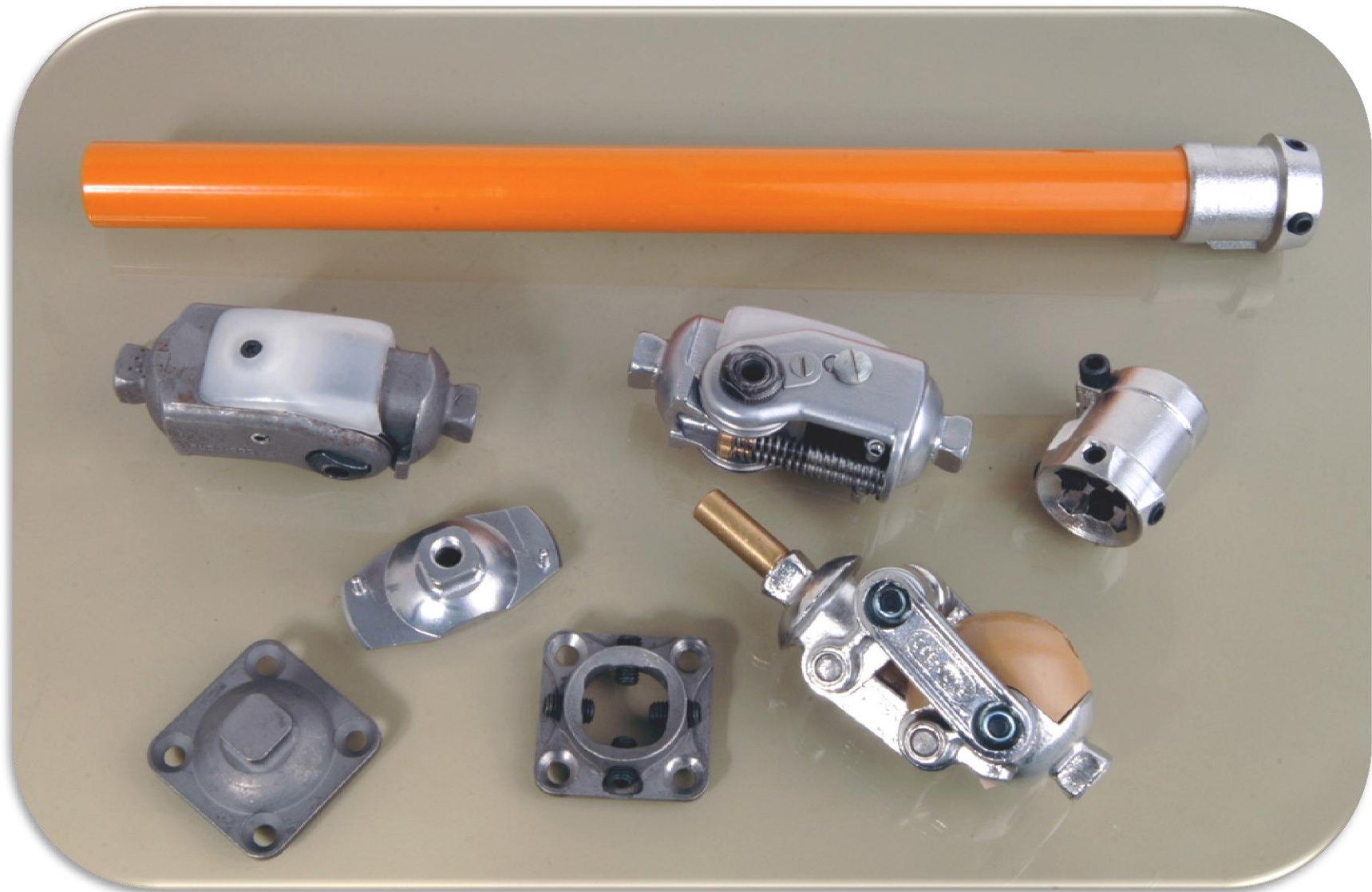



KONTAKT

RUDO AD

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7,
Srbija

Telefon: + 381(0) 11 2650 299

Fax: + 381(0) 11 2651 531

www.rudo.rs

E-mail: office@rudo.rs

